


Product specificatie

Fissure is een handmatig bediend mechanisch apparaat dat bestaat uit een conisch-puntige cilindrische buis, uitgerust met een intern actiemechanisme dat nodig is voor het uitklappen van 4 naalden van het cilinderoppervlak loodrecht op de lengteas van het apparaat, gescheiden door een hoekafstand van 90°. Het mechanisme wordt door de arts bediend vanaf het eindgedeelte van het apparaat, waar zich een knop bevindt die langs de as van het apparaat kan worden gedraaid en die een veiligheidsknop heeft voor het ontgrendelen of vergrendelen van het intern actiemechanisme.

De buitenste cilinder is uitgerust met meetlijnen die het mogelijk maken om het apparaat veilig in te brengen op de diepte die nodig is om de behandeling op het juiste punt in het anale kanaal uit te voeren.

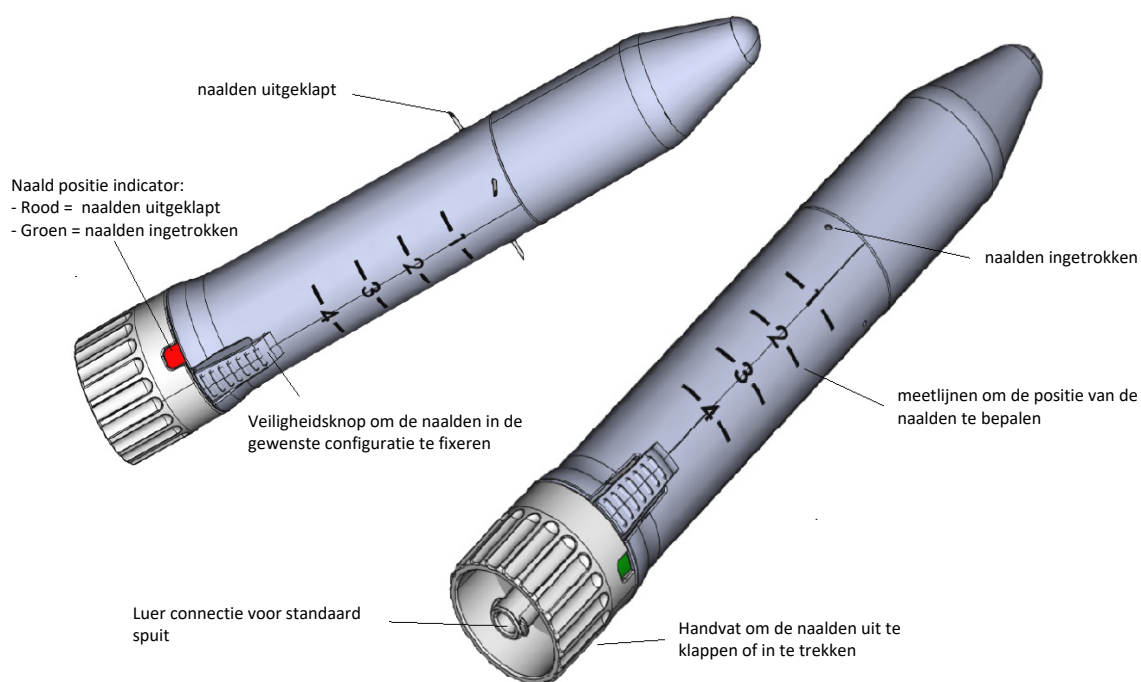

Attribuut	Beschrijving
Lengte	152 mm
Diameter cilindrische buis	22,5 mm
Diameter handvat	25,5 mm
Gewicht	27,5 gr
Aansluiting voor spuiten	Standaard luerlock
Materialen in contact met de patiënt	ABS/PC-polymerenmengsel (Bayblend M850 XF) gekleurd met Mevopur-Blue SB5M176382-ZA, roestvrij staal AISI 304, PLT 34 - 165 (zwarte inkt op de mantel)
Materialen die in contact komen met het toe te dienen geneesmiddel	TPE (Chemiton Med TMB0NA80.001), MABS (Terlux 2822HD), roestvast staal AISI 304 en Mevopur-Blue SB5M176382-ZA (griepkleur).
Naald	Type afschuining: lancet kort; materiaal: AISI304; binnendiameter: 0,40 mm; buitendiameter: 0,60 mm
Steriliteitsstatus	Apparaat steriel afgeleverd na sterilisatie met ethyleenoxide
Verpakking	PET-blister verzegeld met een Tyvek-laag